


Instructie nasopharynx onderzoek (kinkhoest)

HMC diagnostiek




1 Open de verpakking. Neem het wattenstokje en het buisje eruit.

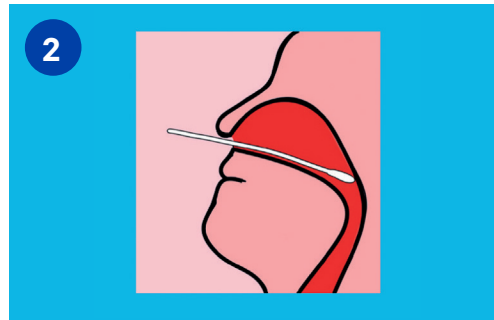


2 Neem materiaal af uit de nasopharynx met behulp van de flexibele swab.


Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx en draai die voorzichtig om zijn as.

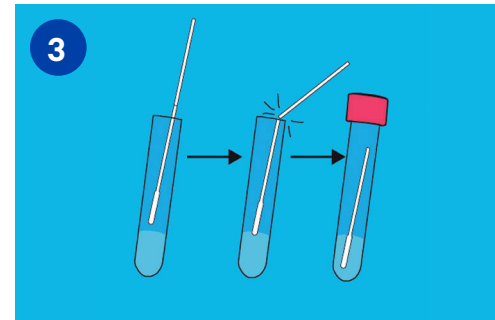


3 Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekeurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.

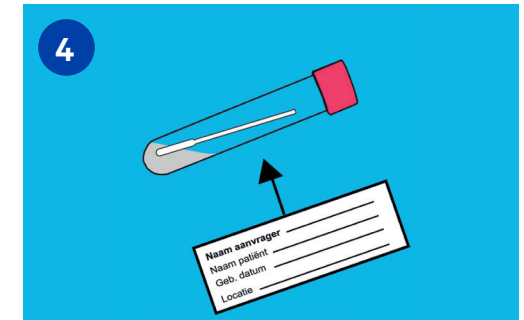


4 Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.

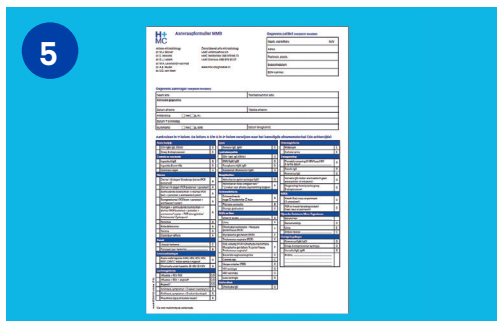


5 Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

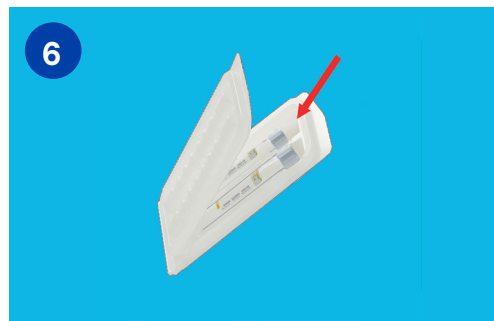

6 Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.

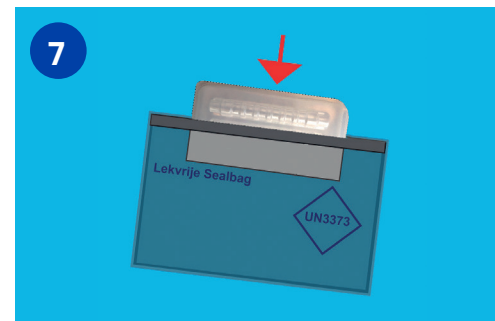

7 Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

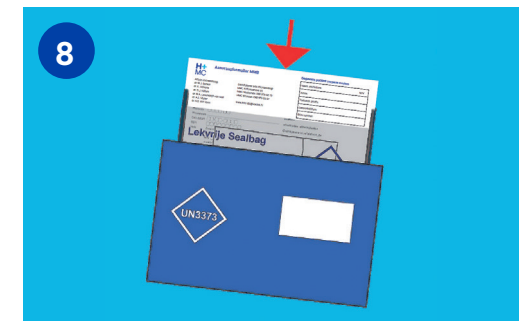

8 Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.