


# Instructie SOA mannen en vrouwen (anaal, keel en overig)

HMC diagnostiek




Open de verpakking. Haal de 2 wattenstokjes en het buisje eruit. De witte wattenstok (zakje met rode opdruk) is bedoeld om het oppervlak globaal schoon te maken. De blauwe wattenstok (zakje met groene opdruk) is voor het afnemen van de kweek.

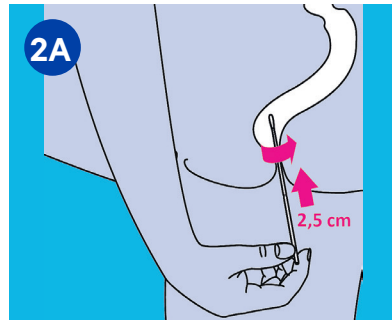


Anale kweek

Neem de witte wattenstok en maak de anus met één veeg schoon. Breng vervolgens de blauwe wattenstok ongeveer 2,5 cm in de anus. Wrijf de stok 5-10 seconden tegen de binnenkant van de anus.

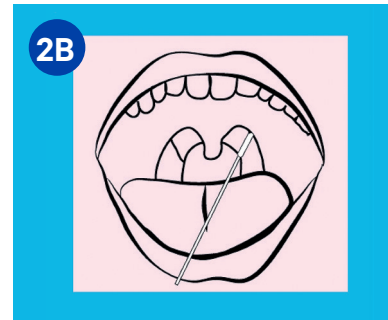


Keel kweek


Neem een keelweek af door met het blauwe wattenstokje (zakje met groene opdruk) achterin de keel te strijken.

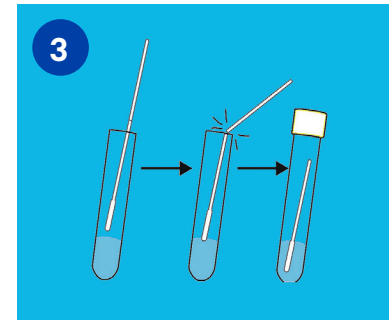


Open de buis en doe het wattenstokje erin. Let op: er zit al vloeistof in de buis. Laat alle vloeistof in de buis. Breek de wattenstok af op het gekleurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.

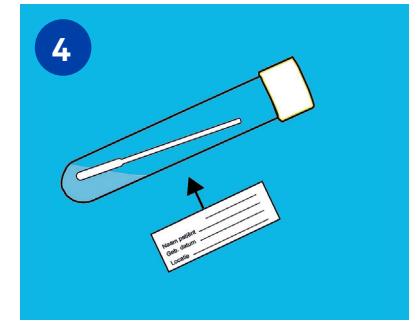

Vul de patiëntgegevens in op het etiket en noteer op welke plek van het lichaam de kweek is afgenomen. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.

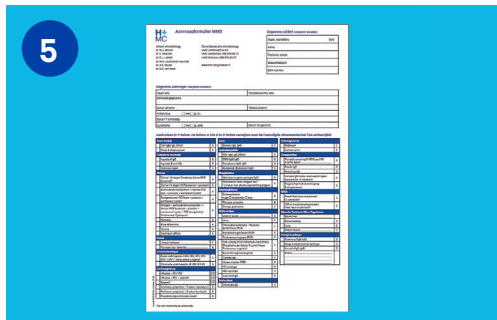

Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

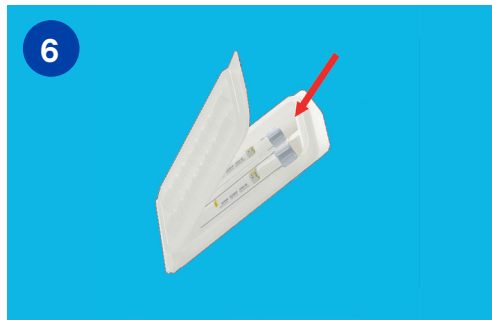

Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.